

KAVO

AmiQA

Helt enkelt outhärlig.



KAVO
Dental Excellence

Dentalenheten KaVo. En investering i din hälsa.




KaVo-dentalenheter är pålitliga samarbetspartner. KaVo-dentalenheter är oöverträffade när det gäller att främja en naturlig kroppshållning med exceptionell rörelsefrihet och allt inom räckhåll. De är en perfekt ergonomisk lösning för varje tänkbar behandlingssituation. Vi strävar efter att kombinera de högsta hygienstandarderna med en estetisk design, för en upplevelse som känns bra för både användare och patienter. Detta paket för tandläkarens arbetsplats är i perfekt harmoni, har en lång livslängd och fungerar tillförlitligt – Made in Germany.



ERGONOMI

Den ultimata komforten för både tandläkare och patienter. Vår främsta prioritet är att personalen ska trivas och må bra länge.

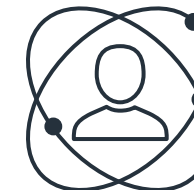

ANVÄNDARUPPLEVELSE

Genialiska funktioner med smart anpassning: en vinnande kombination för effektiva och framgångsrika tandläkarmottagningar.



HYGIEN

Bättre säkerhet i varje process: Upptäck vad KaVo har att erbjuda när det gäller heltäckande hygien. Upplev våra helautomatiska processer och smarta, intuitiva hygienlösningar.



KVALITET

Bevisad kvalitet tack vare Made in Germany: KaVo har erbjudit ultimata kvaliteten i över 100 år. Vi använder enbart högkvalitativa och robusta komponenter, och kontrollerar alla produkter så att de uppfyller de högsta internationella och interna kvalitetskraven. För lång livslängd, stabilitet och pålitlighet.



ERGONOMI



ANVÄNDAR-
UPPLEVELSE



HYGIEN



KVALITET

Det bästa valet i alla lägen

- Optimalt benutrymme och en smal rygg med smalt nackstöd gör det lättare att komma nära patienten.
- Komfort från topp till tå för både patient och användare.
- En avslappnande omgivning: diskret belysning och SPA-belysning.
- Flexibla inställningar tack vare stort höjdinställningsområde och stor belastningsförmåga.
- Lätt, multifunktionell och perfekt för avslappnat arbete: KaVos ergonomiska fotkontroll
- Se bättre med KaVos nya Lumina-behandlingsbelysning

Avancerad teknik, intuitiv manövrering och högsta effektivitet för en förstklassig behandlingsupplevelse

- Känslig, intuitiv, snabb och lätt att använda: 7"-peksskärm.
- Arbeta effektivt: Snabb åtkomst till alla funktioner optimerar ditt dagliga arbete.
- Central styrning: Snabb och enkel manövrering av patientstolen, funktioner för hygien och behandlingsbelysning för både tandläkare och assistenter.
- Enkel kommunikation med patienten vid enheten skapar förtroende och öppenhet.

En upplevelse som känns bra, före, under och efter behandlingen

- Maximal behandlingssäkerhet och pålitlighet: KaVo DVGW-vattenblock: den onekliga pionjären
- Den helt automatiserade hygiencentrat tar hand om vattenförberedelserna och processerna
- Experthjälp med lätta instruktioner steg-för-steg
- Unik minskning av bakterier i sugsystemet med gel gör att sugslangarna får imponerande prestanda

Designade, utvecklade och tillverkade i Tyskland

- Extremt stabila: solid metallbas på 143 kg
- Plastkomponenter av hög kvalitet: certifierade för de allra högsta kraven i vardagen på en mottagning
- Minimalt underhåll och lätt att serva: avancerad teknik med beprövade elektroniska komponenter
- Pålitlig även vid tung belastning: testad för en livslängd på mer än 10 år och belastningar på 660 kg
- Snabb professionell hjälp: både personlig expertservice och via vår support



Lätt, exakt, utmärkt.

För det är riktiga värden som räknas.

KaVo amiQa är en användarvänlig enhet, något som antyds av namnet. Sanna vänner sviker inte: de gör att vi känner oss trygga och får oss alltid att le. Med amiQa har kärnan av KaVos DNA sammanfattats i ett strömlinjeformat koncept: högsta kvalitet, enkla men genialiska hygienfunktioner, sofistikerad ergonomi och modern design. Grundfunktioner till specialistutrustning: amiQa har utmärkta yttre och inre egenskaper.

Något du kan lita på: KaVo amiQa är din trogna kompanjon, i bästa fall livet ut.

Fördelar med KaVo amiQa:



Designen är dynamisk, modern och kompakt

- 1. Stilrent utseende med en sportig design
- 2. Slim design med rena linjer
- 3. Kompakt assistentdel med tre instrumenthållare; finns också i en höger-/vänstersvängande modell för konvertering till en dentalenhet för både höger- och vänsterhänta användare
- 4. 14 klädsel färger som passar aktuella inredningstrender
- 5. Som tillval finns en belysningsdel med offsetbelysning och avslappnande spakänsla

Tandläkardelen: lita på din intuition

- 6. Tre kompakta modeller med brygga för höger- och vänsterhänta användare: TM brygga, S brygga och vagn
- 7. 7"-pekskärm med hög upplösning: intuitiv och taktill teknik så att du snabbt når alla viktiga funktioner
- 8. Kompakt modell med 4 instrumenthållare; versioner med 5 eller 6 hållare finns också
- 9. Brett utbud av utrustning från grundläggande till specialist: för alla indikationer, inklusive integrerade endodontiska och kirurgiska funktioner
- 10. KaVo eSCALER: pålitlig, fullständigt återanvändbar ultraljudsscaler för effektiv profylax, 100 % Made by KaVo
- 11. KaVo DIAGNOcam Vision Full HD: 3-i-1 intraoral kamera för optimerad kariesdiagnostik med full HD-upplösning
- 12. Enkel och nätverksberoende patientkommunikation med fristående KaVo CONNECTbase eller den nätverkskopplade versionen CONNECTlink

Det ergonomiska KaVo-konceptet: hälsosamt arbete i alla behandlingssituationer


- 13. Kompakt patientstol för superb ergonomisk komfort: benutrymme, lätt fotkontroll som kan placeras på valfri plats och ett smalt ryggstöd med nackstöd gör det lätt att komma nära patienten
- 14. Mjuk klädsel för komfort och avslappning när man ligger ner
- 15. Armstöden roterar nedåt, vilket gör det lättare för patienten att sätta sig i och komma ur stolen samtidigt som de kan röra sig fritt
- 16. Allt finns inom räckhåll och det finns integrerade utrustningsalternativ

Hygienfunktioner: säkerhet ska vara enkel

- 17. Intuitiv hygienguide och kompakt hygiencenter för automatiserad sköljning och minskning av bakterier i instrumentslangarna. Extra hållare för sugslangar

Ett enastående tillbehör: avancerad teknik för utmärkt sikt

- 18. Den nya KaVo Lumina-behandlingsbelysningen med UX-belysningsteknik, SPAlight, COMPOshape-läge är enkel att använda

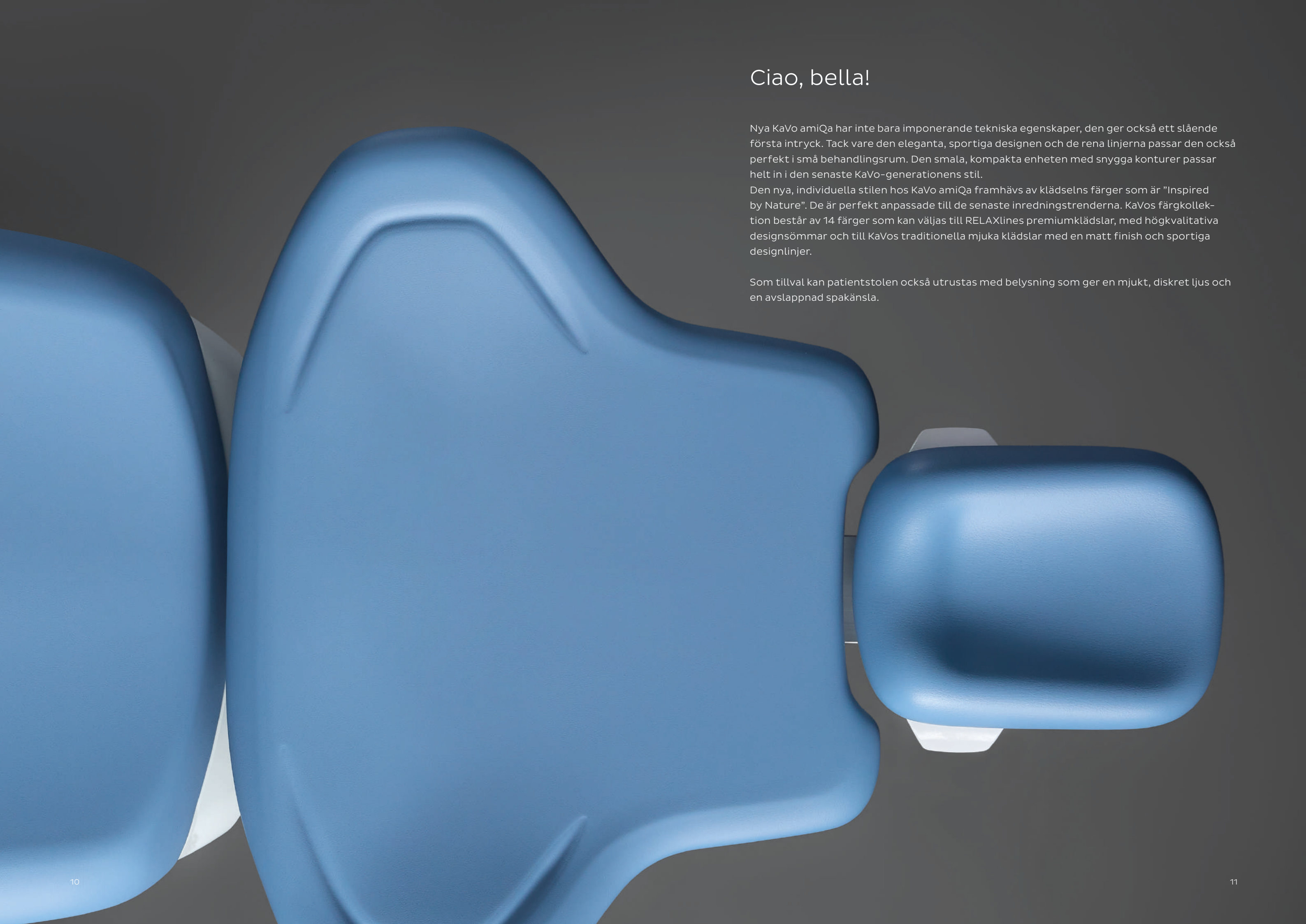

Ciao, bella!

Nya KaVo amiQa har inte bara imponerande tekniska egenskaper, den ger också ett slående första intryck. Tack vare den eleganta, sportiga designen och de rena linjerna passar den också perfekt i små behandlingsrum. Den smala, kompakta enheten med snygga konturer passar helt in i den senaste KaVo-generationens stil.

Den nya, individuella stilen hos KaVo amiQa framhävs av klädselns färger som är "Inspired by Nature". De är perfekt anpassade till de senaste inredningstrenderna. KaVos färgkollektion består av 14 färger som kan väljas till RELAXlines premiumklädslar, med högkvalitativa designsömmar och till KaVos traditionella mjuka klädslar med en matt finish och sportiga designlinjer.

Som tillval kan patientstolen också utrustas med belysning som ger en mjukt, diskret ljus och en avslappnad spakänsla.

HELT BRILJANT: DEN NYA GENERATIONEN AV PEKSKÄRMAR



Den nya generationens pekskärm från KaVo har reaktionstider och en skärpa som imponerar redan från början. Det självförklarande, intuitiva användargränssnittet i tandläkardelen med sin glaspanel av hög kvalitet gör att arbetet blir smidigt, snabbt och avslappnat.

En vän för livet

Principen hos KaVo amiQa är enkel: du kan lita på att den är där för dig och att den gör ett bra jobb i alla behandlingssituationer. Den bistår dig i alla situationer, den anpassar sig perfekt till dina behov tack vare de många utrustningstillvalen för tandläkare och assistenter. Den har programmerbara inställningar som enkelt anpassas till olika användare, inklusive knappprogrammering på hemskärmen. Och även om omständigheterna ändras förblir KaVo amiQa dig trogen. En mängd tillval kan eftermonteras, till exempel fem eller sex brickor eller endodontiska och kirurgiska funktioner. Det är sann vänskap!



Allt klart: sparade parametrar för upp till fem behandlingstyper kan snabbt och säkert tas fram för varje instrument, för upp till sex tandläkare eller hygienister.

Imponerande intuitiv

Den senaste generationen av pekskrmar är inte bara visuellt slående. Skärmen har hög upplösning, är enkel och intuitiv att använda och reagerar snabbt vilket gör den till en perfekt vardagskompanjon. Den visar all viktig information i en översikt och du når funktionerna snabbt och enkelt.

Helt enkelt perfekt!



TM brygga

S brygga

Vagn

Vänster- eller högerhänt? Varför inte båda?

Alla tre modeller av amiQa-tandläkarbryggan passar både höger- och vänsterhänta användare. Det spelar ingen roll vilken version du väljer nu eftersom du alltid kan ändra den om det behövs. Egna kombinationer är också möjliga. S-bordet och vagnen kan till exempel kombineras med en assistentdel som kan svängas till höger och vänster, vilket gör det lätt att byta sida när som helst.



Smart och enkel beroende på dina behov

De praktiska 4 instrumenthållarna på tandläkardelen är perfekta för grundläggande behov eller profylax. AmiQas tandläkardel kan också uppgraderas till en konfiguration med 5 eller till och med 6 instrumenthållare. Du bestämmer vad du behöver på din mottagning.

Alla goda ting ärtre: välj din perfekta modell

Alla tre versionerna av amiQas tandläkarelement medger korta och ergonomiska arbetsavstånd. Beroende på vad du föredrar får du många fördelar med TM brygga, vagnen och S brygga. S brygga har till exempel tre ergonomiska spärrlägen som balanserar instrumentslangarnas vikt optimalt för längder på 50 cm, 70 cm och 90 cm. I vagnversionen är tandläkardelen inte upphängd ovanför patienten, utan är monterad på hjul bredvid behandlingsstolen. TM brygga versionen har en särskilt stor förvaringsyta som bildar en användbar brygga mellan tandläkaren och assistenten.

KAVO INSTRUMENT – KÄNN SKILLNADEN.

Våra instrument är gjorda av de utmärkta material som är särskilt utvecklade för våra produkter. Det i kombination med vår unika produktarkitektur, enheter som är tillverkade av en bit massivt material, för extraordinär precision och hållbarhet. Vi sätter standarden för dagens tandvårdsinstrument. Vår omfattande erfarenhet med över hundra år av konstant innovation, återspeglas i designen och funktionen hos våra instrument. Resultatet är optimal användarprestanda tack vare exakt, avslappnat arbete.



Produkter som uppfyller dina förväntningar

När det gäller instrument vill du bara ha det bästa. KaVo-instrument täcker alla användningsområden och ger bästa möjliga sikt och tillgång till munhålan, så att du alltid kan erbjuda behandling av högsta kvalitet och precision. I kombination med den lätta, extremt -kompakta och vibrationsfria mikro-motorn INTRA LUX KL 703 LED, kan du arbeta effektivt och avslappnat över hela hastighetsområdet från 100 till 40 000 v/min tack vare SMARTdrive.



Specialistteknik för alla



Nya KaVo eSCALER

Nya KaVo eSCALER är made in Germany: made by KaVo. KaVo eSCALER rengör tänderna extremt noggrant och tidseffektivt: den linjära oscillerande spetsen är mycket effektiv upp till 30 000 Hz. De exakt definierade ultraljudsvibrationerna, det ergonomiska handstycket, dagsljusbelysningen och de fina spetsarna, som gör att man lätt även når svåråtkomliga områden ger maximal behandlingskomfort för både patient och användare.




KaVo SONICflex: allroundproffset med topprestanda

KaVo SONICflex är ett allroundproffs: den klarar nästan vilken indikation som helst och ger behandling som är bekväm och snäll mot emaljen. Med mildt pulserande luftvibrationer på ungefär 6 000 Hz och fler än 50 spetsar, är denna scaler populär bland både patienter och användare. Den är perfekt för alla användningsområden, inklusive profylax, endodonti, parodontologi, minimalt invasiv kariesbehandling och förberedelser.

Endodonti i toppklass

Med 3 olika lägen för filstyrning gör de integrerade endodontiska funktionerna att du slipper köpa en dyrbar endodontisk enhet. Den integrerade fildatabasen med nästan 200 fördefinierade filar gör att du kan ta fram, ställa in och spara nyckelparametrar som utväxlingsförhållanden och vridmoment via tandläkardelen, och lägga till filar när som helst.

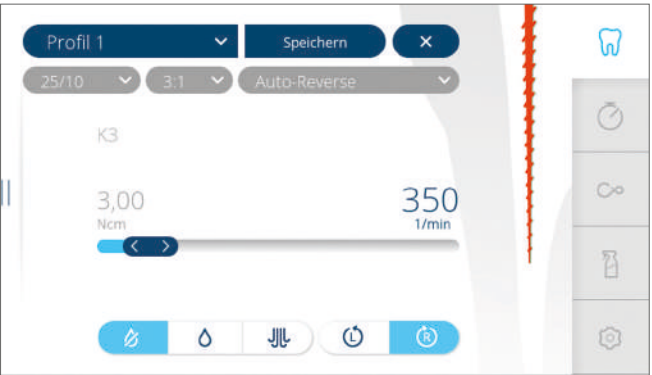


Det smarta kirurgivalet


Gör den mest krävande proceduren så bekväm som möjligt genom att utrusta din KaVo amiQa med KaVo INTRA LUX S600 LED. Detta är en av de lättaste och minsta kirurgimotorerna. När du använder den i kombination med KaVos kirurgiinstrument och den integrerade pumpen för koksaltlösning, har du tillgång till alla funktioner hos en modern kirurgisk enhet.




FÖR HÄLSAN ÄR VÅR VIKTIGASTE TILLGÅNG

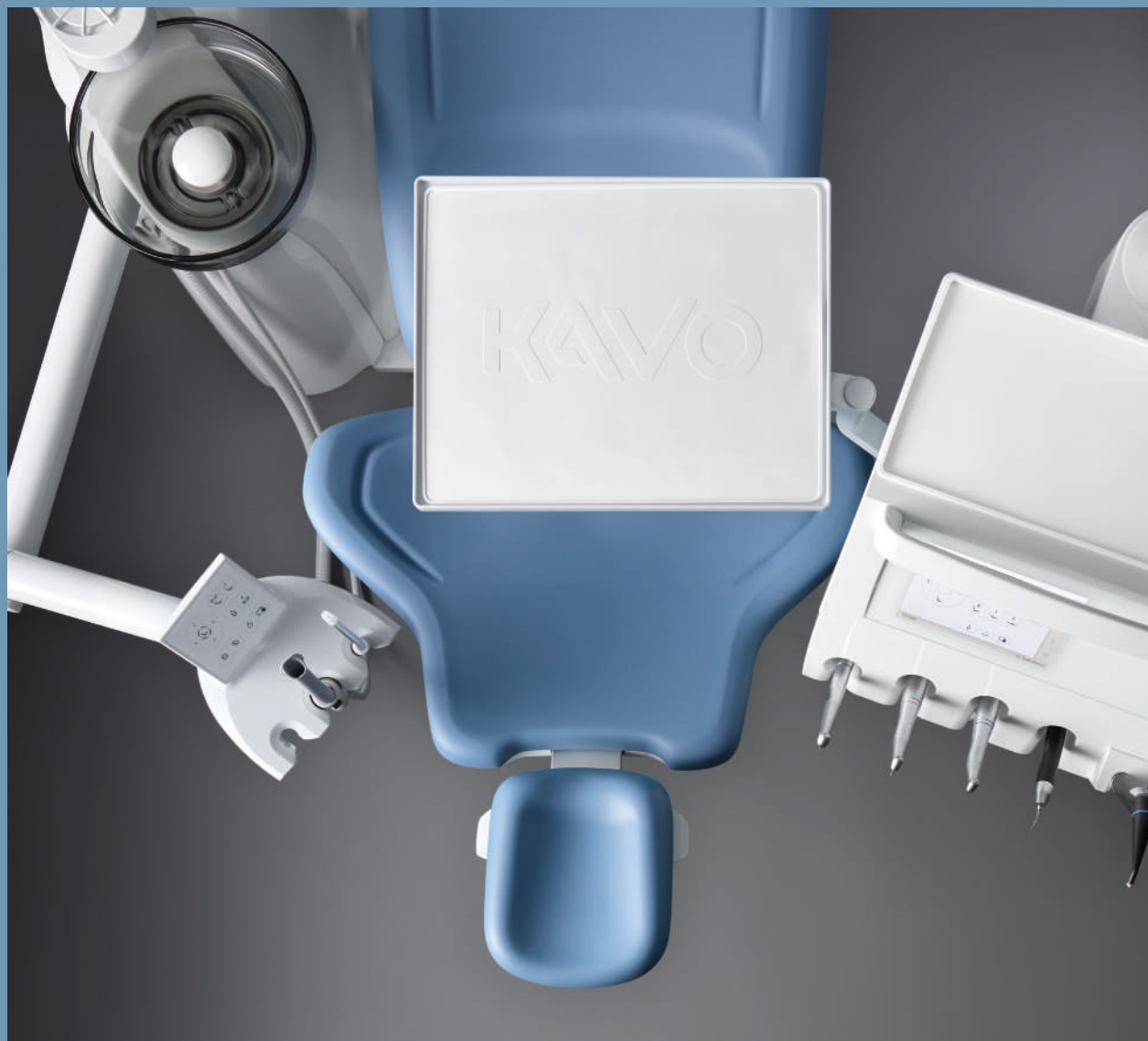

Tack vare det förstklassiga ergonomikonceptet är en investering i en KaVo-dentalenhet också en investering i mottagningspersonalens hälsa. KaVo amiQa är ergonomiskt konstruerad för att göra behandlingarna så stressfria som möjligt, vilket bidrar till en hälsosam, ryggvänlig kroppshållning och intuitiva processer. Även patienterna märker fördelarna, eftersom de ligger bekvämt och avslappnat i behandlingsstolen KaVo amiQa.

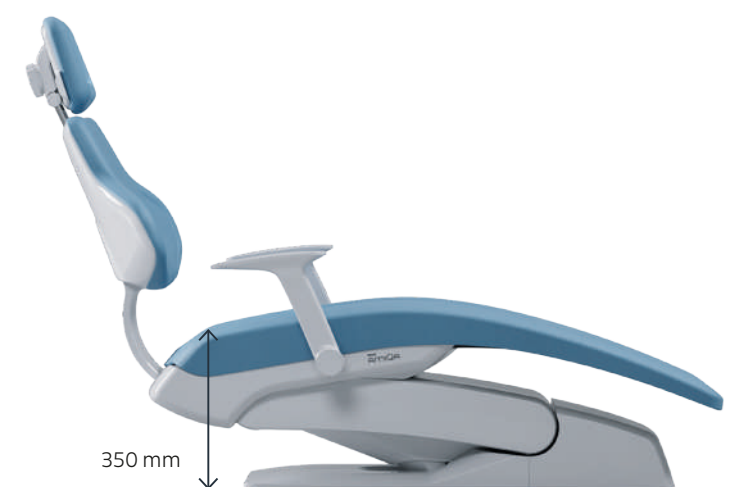

KaVo amiQa garanterar att dentalenheten fungerar fullt ut även om det sitter en mycket tung patient i behandlingsstolen.

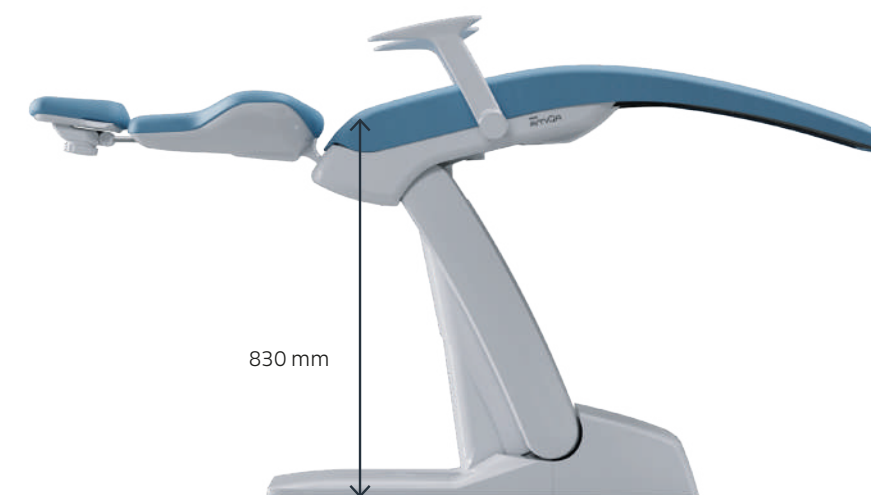

Sanna vänner ...

... möter dig på din nivå

Patientstolens höjd kan varieras mellan 350 och 830 mm, vilket ger optimal ergonomisk komfort, vare sig du föredrar att arbeta sittande eller stående.

... ger dig frihet

KaVo amiQa-patientstolen har gott om utrymme och plats för benen. Du kan också placera fotkontrollen där det passar dig bäst, eftersom patientstolens smala design och fotplattan ger gott om utrymme. Detta gör att du kan arbeta i en avslappnad och ryggvänlig ställning, samtidigt som du sitter tillräckligt nära patienten.





Det bästa valet i alla lägen

Optimal placering är inte bara bekvämt för patienten, utan är också viktig för en ergonomisk arbetsställning. Beroende på patientens storlek och indikationerna gör de mångsidiga vändbara kuddarna och det kontinuerligt justerbara dubbelledade nackstödet, att patienten ligger bekvämt samtidigt som du ser bra och kommer åt arbetsområdet. KaVo RELAXline och komforthuvudkudden ger ännu bekvämare behandling. Premiumklädseln har minnesskum som anpassar sig perfekt till patientens kropp och ger utmärkt komfort när man ligger ner, även vid långa behandlingar. Dina patienter ligger helt avslappnade och du kommer åt optimalt.



Progress-ryggstödet: optimal arbetsställning och tillgång till patientens mun. Brett armbågsstöd för extra komfort

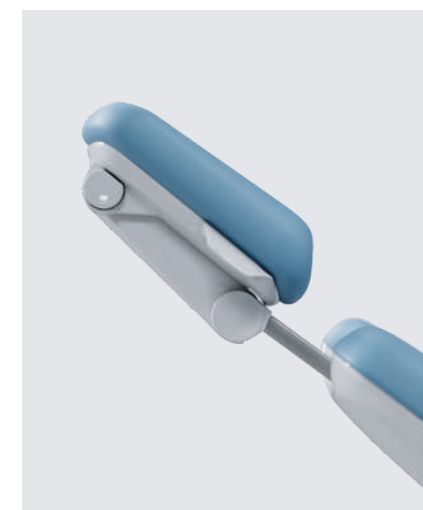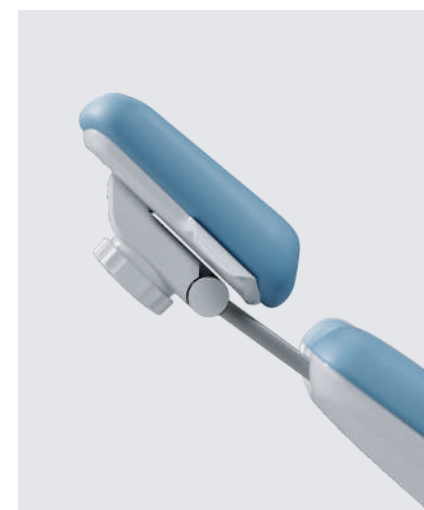

Enkelt och bekvämt: lättmanövrerat dubbelledat nackstöd med vridknapp eller mekaniskt klämfäste och svängbar huvudkudde.




Perfekt placerad

I KaVo amiQa ligger dina patienter bekvämt. Tack vare den integrerade Trendelenburg-rörelsen vinklas och höjs fotstödet automatiskt så den anpassas till ryggstödet lutning. Denna kombinerade rörelse gör att patientens rygg inte trycks ihop eller sträcks ut när ryggstödet justeras. Positionen med höjda ben främjar också patientens blodcirkulation.

Lätt att komma in och ur stolen


KaVo amiQas armstöd kan fällas ner så att man lättare kommer i och ur stolen. Du erbjuder dina patienter stöd och säkerhet utan att behöva kompromissa om rörelsefrihet.

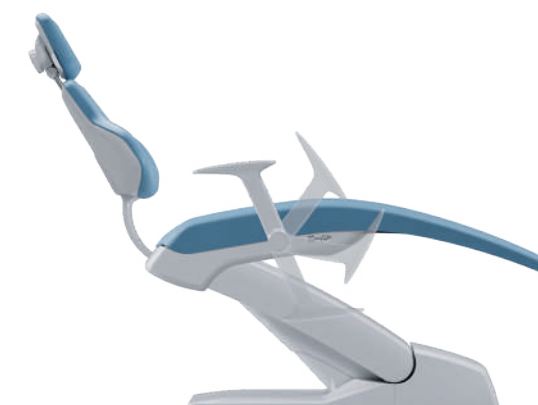


En sann amiQa: pålitlig i alla lägen

Varje rörelse ett mästerverk

Under behandlingen måste du kunna utföra varje rörelse exakt. Allt måste vara inom räckhåll och kunna nå intuitivt, vare sig du behandlar själv eller med en assistent. AmiQas tandläkardel, brickstöd och assistentenhet har ett stort rörelseområde och kan placeras i rätt läge när som helst. I

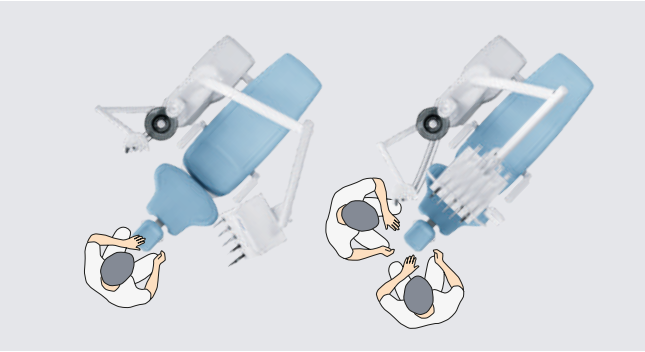

svängarmsversionen ger den maximala förlängningen på 90 cm av instrumentslangarna och bordets låga höjd på 45 cm extra utrymme.

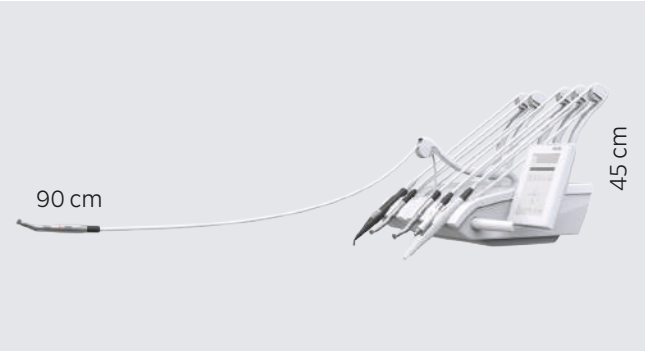

Stöd för assistenterna

Den kompakta assistansenheten i KaVo amiQa är försett med en kapacitiv pekskärm och ett tydligt utformat användargränssnitt. Patientstolen, funktionerna för sköljning och belysning nås snabbt och direkt. Den flexibla höjdställningen och det stora vridområdet förbättrar arbetsställningen.



Är händerna upptagna? Inte med KaVos fotkontroll!

Du kan styra alla funktioner och integrerade enheter lätt och ergonomiskt med fotkontrollen, även kommunikationen med patienten. Förutom att den är enkel att använda minskar den även risken för korskontaminering. Positionering är ännu lättare med den trådlösa modellen.



Effektivt arbetsflöde kräver att allt finns inom räckhåll

I arbetets mittpunkt

Hjärtat i dentalenheten är KaVo Centro-systemet. Detta smarta system placerar alla apparater förnuftigt och ergonomiskt på ett ställe. Varje apparat kan nås lätt och snabbt. Vill du konvertera eller uppgradera din enhet med ny teknik vid ett senare tillfälle? Centro-systemet gör det möjligt. Apparater och komponenter kan bytas ut snabbt och enkelt tack vare de många adaptarna. Nya amiQa optimerar arbetsflödet eftersom allt finns inom räckhåll, vilket gör att du kan koncentrera dig på det som är viktigt.



Superb flexibilitet i KaVo Centro-systemet



Intraorala röntgen- bilder direkt på plats

KaVo ProXam iX kan enkelt monteras på lampstolpen med en adapter. Därmed kan du ta röntgenbilder anpassade till indikationerna direkt på tandläkarenheten, snabbt, enkelt och exakt.



ENKEL RENGÖRING: HYGIEN MED KAVO AMIQA



Den optimala hygienprocessen är enkel, bekväm och helt säker med KaVo amiQa. Huvudkomponenter kan lätt tas av för att minska bakterier, ytorna är lätta att rengöra och instrumentslangarna sköljs automatiskt.

Säker hygien är lätt

Ett hygiencentra är integrerad i KaVo amiQas hölje för effektiv rengöring och minskning av bakterier i instrumentslangarna. Instrumentslangarna är placerade här för enkel automatisk sköljning. Hygienstationen har också kranar för manuell sköljning av sugslangarna med rent vatten. Den kan tas bort och autoklaveras.


Släpp fram vattnet

Det automatiska HYDROclean-programmet rengör lätt avlopps- och avkilningssystemen och kombineras automatiskt med sköljprogrammen för instrumenten. På det sättet förlänger amiQa livslängden på ditt sugsystem.



Automatiskt sköljprogram

De förprogrammerade rengöringsprotokollen underlättar skötseln av KaVo amiQa och uppfyller RKI-riktlinjerna. Hygienguiden hjälper dig att förbereda enheten steg för steg, vare sig det är efter behandlingen, på morgonen, på kvällen eller varje vecka. Programmen tar sedan själva hand om sköljning och rengöring av instrumentslangarna.

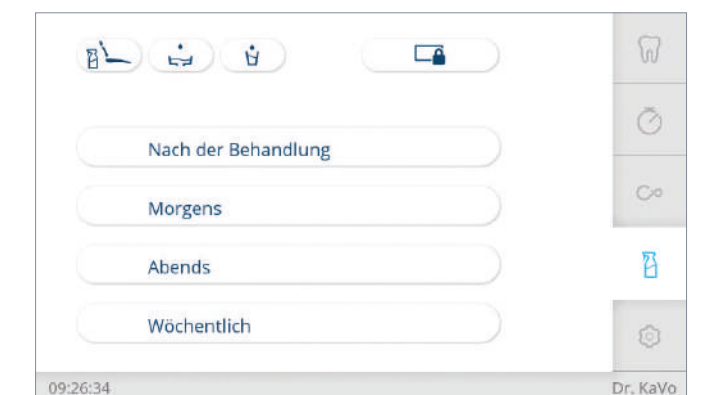




Optimalt skydd mot kontaminering

Med KaVo amiQa är inte heller skydd mot kontaminering något problem. Kontinuerlig bakteriereducering med KaVo OXYGENAL 6 säkerställer att inga mikroorganismer kan spridas under normala behandlingar. Med det intensiva bakteriereduktionsprogrammet (veckorengöringspro-

gram) kan du skydda dina patienter mot mikroorganismer som kan bildas vid stillestånd så som vid helger eller semestrar, och också se till att kyl- och sköljvätskor är av högsta kvalitet.

Inga kompromisser när det gäller säkerhet, hygien och flexibilitet. Med DVGW-vattenblock.

KaVo sätter nya standarder för dentalenheten med nästa generations vattenteknik. DVGW-vattenblocket förser instrumenten och patienten med sprut- och sköljvatten, och doserar automatiskt rätt koncentration av KaVo OXYGENAL 6. Vattenblockets air gap konstruktion förhindrar att vatten från dentalenheten rinner tillbaka i dricksvattensystemet. Detta bibehåller vattensystemets kvalitet samtidigt som det uppfyller de stränga kraven i DVGW. Vattenblockets air gap rengörs också genom att fontänskålen sköljs med koncentrerat KaVo OXYGENAL 6. Detta ger extremt bra hygien och ökar säkerheten för dina patienter.

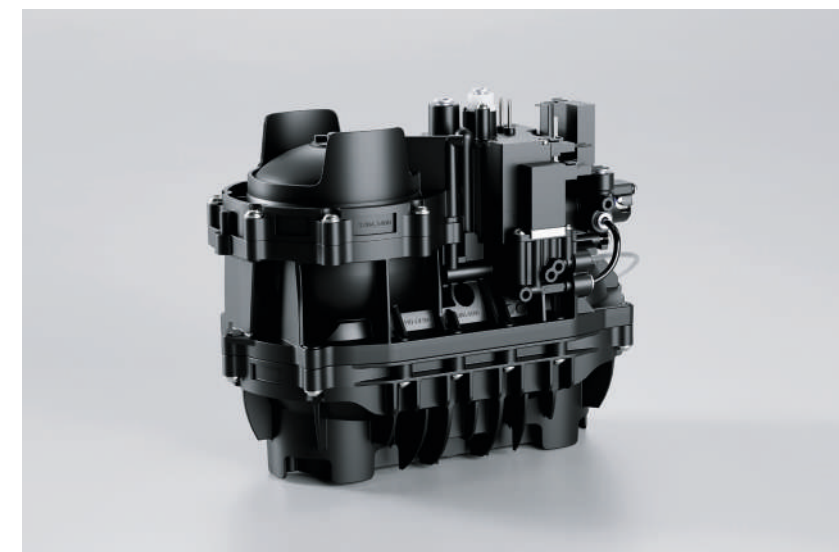

Skyddat vattentillförselsystem

KaVo-instrument och -motorer har ett returskyddssystem som förhindrar att kontaminerat vatten sugas in i dentalenheten. Detta skyddar vattensystemet.



Spara tid: Färdig DEKASEPTOL gel kan appliceras direkt i sugslangar och system. Den speciella fördelen med detta är att gelen verkar på kritiska ställen istället för att bara sköljas igenom.




Handtag, instrumenthållare, fontänskålar, svängarmar och silikonmattor är lätta att ta bort och desinfektera. De övre och undre delarna av kåpan är helt inneslutna så inget smuts kan komma in i dentalenheten. Det hygieniska handtaget gör att sugfiltren går att bytas enkelt och säkert.

KaVo Lumina operationslampa med UX Light Technology.

Tandvård från den ljusa sidan.

Operationslampan KaVo Lumina sätter nya belysningsstandarder för tandläkarmottagningar. Den här banbrytande utrustningen tar ljus-teknologi till en helt ny nivå, med flera smarta funktioner och an-vändarvänlighet i särklass. Den innovativa UX Light Technology ger perfekt belysning av alla nivåer, ända in till molarnivå – utan störande reflektioner på de främre tänderna. I kombination med det optimerade ljusfältet innebär detta minde ansträngning för ögonen, så att du kan arbeta mer koncentrerat. Den exakta färgåtergivningen i ljusspektru-met ger en kvalitet vi kallar ”Made by KaVo”, något som underlättar det dagliga arbetet för både teknik- och designintresserade.

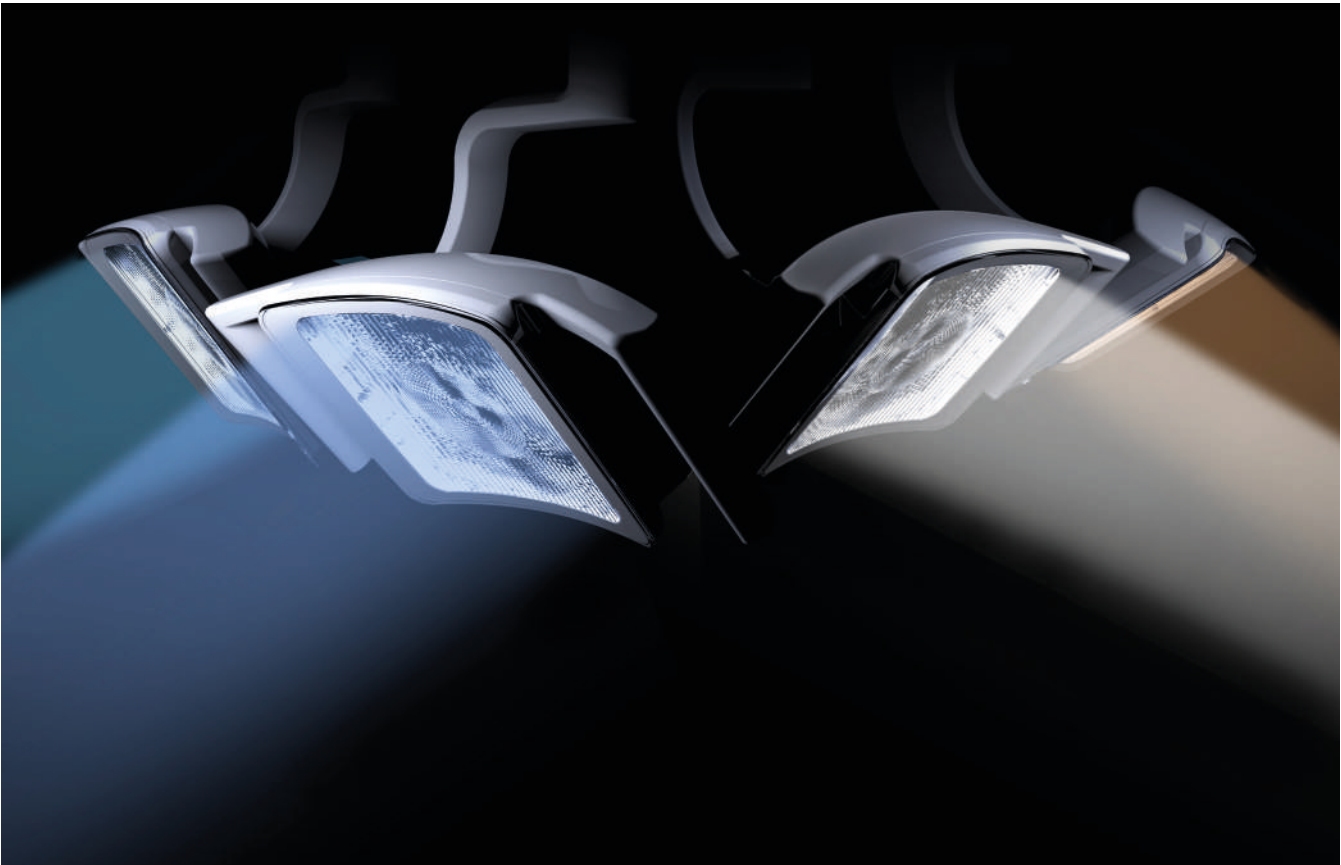

En ny definition av mjuka rörelser

Den balanserade strukturen och de bekväma handtagen har hämtat inspiration från japanska kockknivar och låter dig använda och positionera KaVo Lumina helt perfekt med mjuka rörelser.



COMPOshape-läge

Färgspektrumet i det nya COMPOshape-läget med mindre andel blått gör det lättare att åstadkomma estetiska skalfas-ader. Tack vare förbättrad färg- och strukturåtergivning syns kontraster utan för tidig härdning av kompositen.



UX Light Technology

Luminas nya UX Light Technology har skapats genom en kombination av ett innovativt system med enkeloptik och en unik bländare. Det genererar konstant, pulsfritt ljus av högsta kvalitet. Det naturliga färgspektrumet som skapas av UX Light Technology eliminerar behovet av att justera färgtemperaturen och belyser molarerna optimalt, utan irriterande reflektioner på de främre tänderna. Det skapar också ett nytt, ergonomiskt ljusfält.



SPAlight-läge

SPAlight-läget ger ett färgspel bestående av blå och gröna nyanser som har en bevisat lugnande effekt, enligt ban-brytande färgpsykologi. Det innebär att det kan användas för att skapa en lugnande atmosfär och spaliknande känsla före och mellan behandlingar.

Här hittar du rätt tillbehör



Ge din KaVo amiQa en extra personlig touch med rätt tillbehör! Utnyttja KaVo koncept med att mixa och matcha för att anpassa din amiQa efter dina behov. KaVo erbjuder en mängd tillbehör för effektiva och praktiska arbetsflöden. Pekskärmen och fotkontrollen gör det lätt att komma åt alla funktioner och parametrar hos dina integrerade specialenheter. Välj amiQa som din pålitliga samarbetspartner på mottagningen. Den kan användas för profylax, ortodonti, kirurgi eller endodonti.

KaVo MAIA LED

Med KaVo MAIA LED får du modern LED-belysningsteknik till ett fantastiskt pris.

- steglöst justerbar ljusstyrka på upp till 35 000 lux
- enhetlig belysning som nästan motsvarar dagsljus kvaliteten (5 000 K) för naturliga färger och texturer
- stabilt ljusfält oavsett position tack vare indirekt ljus via reflektorer
- avtagbara, steriliserbara handtag för säker och enkel hygien



Perfekt kroppshållning.

Det är svårt men oerhört viktigt för en tandläkare att ha en ergonomiskt hälsosam och bekväm arbetsställning i varje behandlingssituation. Och ingenting påverkar din arbetsställning mer än stolen som du sitter på varje dag. KaVo PHYSIO Evo och Evo F är noggrant avstämda till behoven och arbetsflödena på en tandläkarmottagning.



Ergonomisk komfort och bekvämlighet in i minsta detalj.

Sitsen och ryggstödet kan anpassas till dina kroppsliga förutsättningar och ditt personliga arbetssätt tack vare separata inställningsfunktioner. Stoppningen på ryggstödet och sitsen på KaVo PHYSIO Evo är ergonomisk. Upphöjningen i mitten av sitsens stoppning ger en stabil sittställning och förhindrar att du glider, även vid snabba, rullande rörelser. Det rundade lårstödet ger dig gott om rörelsefrihet. Det fjädrande ryggstödet ger konstant stöd för dina ryggmuskler, särskilt i svanken, och skyddar dem på sikt.

Ett enastående koncept

Behandlingsstolen KaVo PHYSIO Evo har godkänts av kampanjen för friskare rygg i Tyskland. En oberoende, multidisciplinär expertkommitté utfärdar denna utmärkelse baserat på strikta testkriterier för ergonomi och hälsa.



SE DET: OPTIMAL PATIENT- KOMMUNIKATION.



Förklara de nödvändiga behandlingsåtgärderna för dina patienter tydligt och detaljerat, tack vare de diagnostiska bilderna med hög upplösning och med högkvalitativ färgåtergivning.



DIAGNOcam Vision Full HD

Innovation när den är som bäst.

Föreställ dig en kamera som kunde ge dig tre kliniskt relevanta bilder för kariesdiagnostik, med utmärkt skärpa och på mindre än en sekund. Nu är det möjligt: med DIAGNOcam Vision Full HD kan du välja om du vill ta en intraoral-, transilluminerad eller fluorescensbild eller om du föredrar att kombinera två eller tre exponeringsmoder. Tack vare en HD-upplösning på 1920 x 1080 pixlar visas alla bilder med extrem skärpa. Tack vare att kameran är lätt och har perfekt balans kan du arbeta ergonomiskt och utan att bli trött.

KaVo ProXam iCam –

En liten kamera med stor verkan

Använd perfekta bilder med ett stort skärpedjup och utmärkt färgåtergivning för att förklara den dentala situationen för dina patienter. Den lättanvända KaVo ProXam iCam ger dig alltid en optimal bild. Med den här kameran ser du en tydlig bild på ett bildavstånd på bara 9–35 mm. Dessutom har den ett makroläge. Bildtagning kan göras för hand eller med fotkontrollen.



Visa dina patienter

KaVos 22"-skärm visar en bild med hög upplösning i full HD-kvalitet, har imponerande kontrastvärden och briljant färgåtergivning. Med två digitala ingångar är den optimalt koordinerad med alla funktioner hos bildenheter som kameror eller mikroskop. För maximal hygien har skärmen en skyddande glaspanel, små öppningar i höljet och kan justeras med enbart en hand. Valet kunde inte vara tydligare!



Den nya stöttepelaren för kommunikation med patienten som är integrerad, enkel och effektiv.

KaVo CONNECTbase öppnar upp ett nytt, enkelt arbetsflöde för kommunikation med patienten. Du kan använda KaVo CONNECTbase för att förklara patientens dentala situation direkt på KaVo amiQa, utan att installera något ytterligare program. Koppla bara in din kamera och börja. Bilderna visas på dentalenhetens skärm och kan jämföras med tidigare sparade bilder.

Plug and play-principen ger smidiga arbetsflöden med lätthet


Genom att använda kameror som är direkt kopplade till KaVo-dentalenheten kommer du snabbt åt dina bilder och kan sedan exportera dem via USB.

Det är lika lätt att använda pekskärmen som fotkontrollen på dentalenheten vilket innebär att du inte behöver lämna din plats under behandlingen eller avbryta arbetet i onödan.

Vill du komma åt ytterligare indata? Inget problem. Olika HDMI-källor kan visas på dentalenhetens skärm med en enkel omkoppling på tandläkardelen.

Gör behandlingen till en upplevelse

Nu behöver patienterna inte längre ha tråkigt när de väntar. Du kan även skapa en välkommen avledning för dina patienter med visuella upplevelser på KaVo amiQa. Det stora urvalet av media, vilket inkluderar en anpassningsbar välkomstskärm och olika skärmläckare med ett stort urval av foton eller bildspel, kommer att vara till glädje för patienter i alla åldrar. Du kan samtidigt använda skärmen för att visa sådant som är relaterade till din mottagning eller ge relevant information. Med KaVo amiQa kan du skapa en personlig upplevelse.

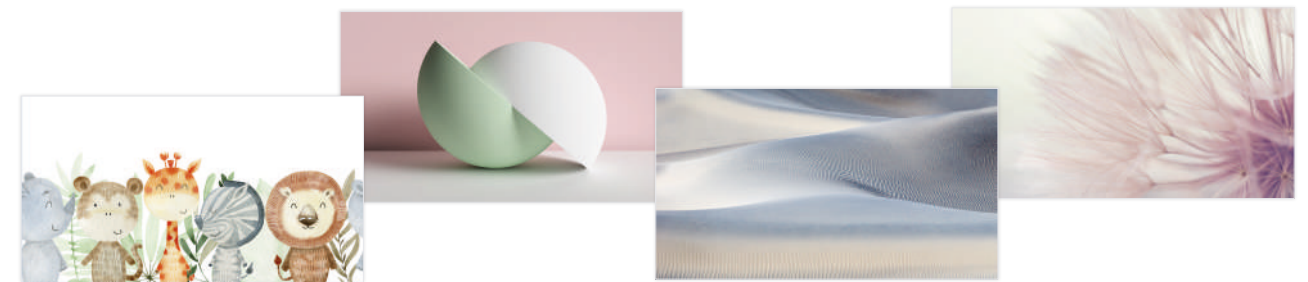

Välj bland många teman för din skärmbakgrund för att matcha mottagningens design.



KaVo **CONNECT**
link

Länka enkelt ditt program för mottagningsadministration.

CONNECTlink-programmet länkar ditt program för mottagningens administration med KaVo-dentalenheten, så att du snabbt och enkelt föra över patientdata och kliniska bilder. Du ser direkt all relevant information på pekskärmen på tandläkardelen av KaVo-dentalenheten och du kan lägga till nya kliniska bilder med KaVos kameror som vanligt. Tack vare CONNECTlink överförs dessa bilder automatiskt till programmet för mottagningsadministration och länkas till respektive patientmapp.

CONNECTlink-programmet kan köpas som en separat modul till ditt nuvarande CONNECTbase-patientkommunikationssystem. För att använda CONNECTlink-programmet behöver du CONNECTbase och en licens för CONNECTlink på din KaVo-dentalenhet.




Utrustningsalternativ


Patientstol				Minilight 3F/G3F	○
Mjuk stoppning	●			Satelec MiniLED polymerisationshandstycke	○
Mjuk RELAXline-stoppning	○			Brickhållare för surfplatta	○
				Sväng- och höjdjustering	●
Ryggstöd				Selektiv supportsats	●
Progress (optimerat)	●			Kort arm	x
				Roterbar höger/vänster	○
Nackstöd				Stomme	
Dubbelledat med vridknapp	●			Fontänskål av porslin	x
Dubbelledat med mekanisk klämma	○			Fontänskål av glas, rökgrå	x
Bekväm huvudkudde	○			Hygienstation	●
				Konstant bakteriereduktion ¹	○
Armstöd				Intensiv bakteriereduktion ¹	○
Vänster	○			HYDRClean (sköljsystem för sug)	●
Höger	○			Varmvattenberedare	○
				VACUstopp	●
				(Trådlös) fotkontroll	○
Tandläkardelen				Försörjningssystem	
Pekskärm	●	●	●	Kompakt vattenblock	●
SMARTdrive	●	●	●	DVGW-vattenblock	○
4 instrumenthållare ²	○	○	○	DVGW-vattenflaska	○
5 instrumenthållare	●	●	●	Anslutning till externa enheter	○
6 instrumenthållare	○	○	○	Vakuumreglerventil	○
Turbinslang	○	○	○		
INTRA LUX-motor KL 703 LED™	○	○	○	Avloppssystem	
Integrerad vridmomentsstyrning (endo)	○	○	○	Externrt våtsugningssystem	●
KaVo eSCALER/ultraljudsscaler	○	○	○	DÜRR-amalgamavskiljare	○
SONICflex™-luftscaler	○	○	○	Automatiskt DÜRR-avskiljare	○
Trefunktionshandstycke	x	x	x	Behandlingslampa	
Minilight 3F/G3F	x	x	x	KaVo Lumina	○
Multifunktionellt handstycke	○	○	○	MAIA LED	○
Fysiologisk koksaltlösning	○	○	○	Lampstång	○
S600 LED kirurgisk motor	○	○	○	Adapter för lampstång	○
Sprayvärme för instrumenten	○	○	○	(t.ex. för KaVo ProXam iX)	
USB-gränssnitt	○	○	○		
Pneumatiska bromsar för armsystem	-	○	-	Patientkommunikation	
Brickhållare för två standardbrickor	○	○	-	KaVo CONNECTbase	○
Servicebord 1568 för två standardbrickor	-	-	○	CONEXIO	○
				KaVo Screen	○
				KaVo ProXam iCam	○
				KaVo DIAGNOcam Vision Full HD	○
Assistentdel					
Kapacitiv pekskärm	●				
3 instrumenthållare	●				
Sug för spraydimma	●				
Salivsug	●				
Trefunktionshandstycke	○				

● Standardutrustning | ○ Extrautrustning | x Måste väljas | - Inte tillgängligt
¹ Endast i kombination med DVGW-vattenblock och DVGW-vattenflaska | ² Nedsatt pris

Klädselfärger ”Inspired by Nature”

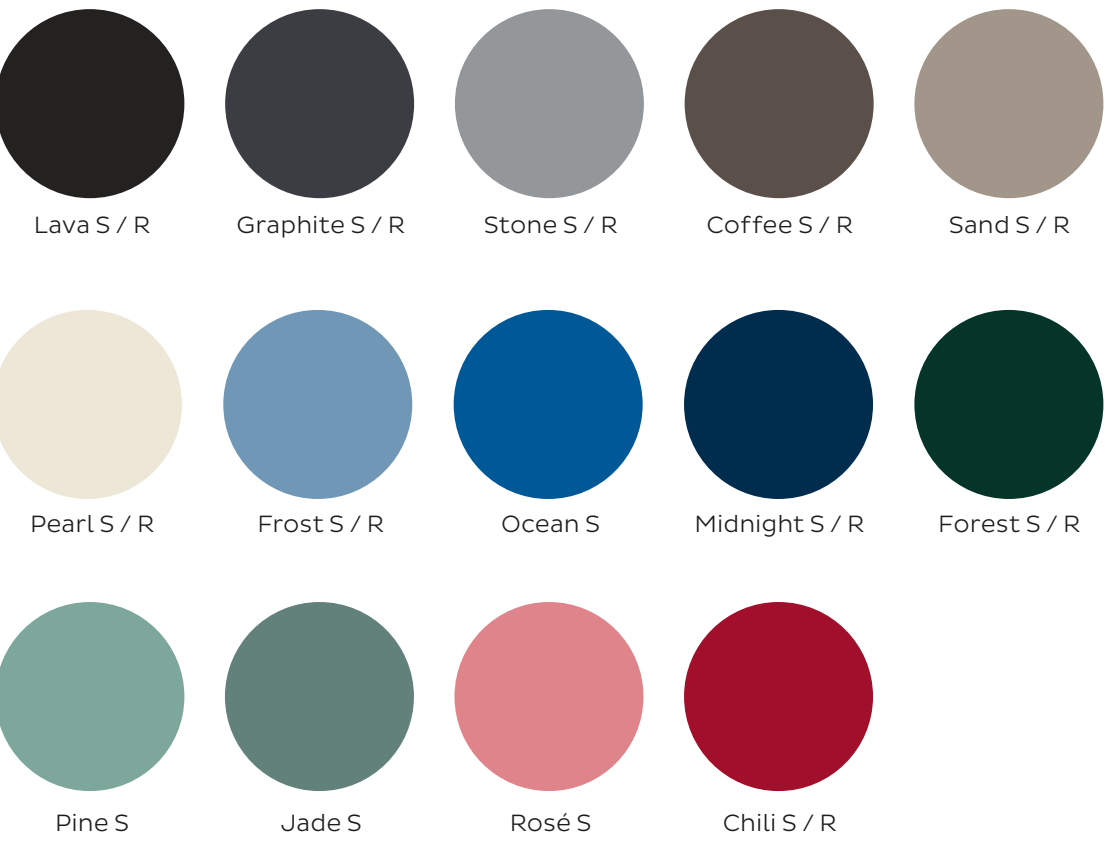

Finns som:
S – Standard
R – RELAXline

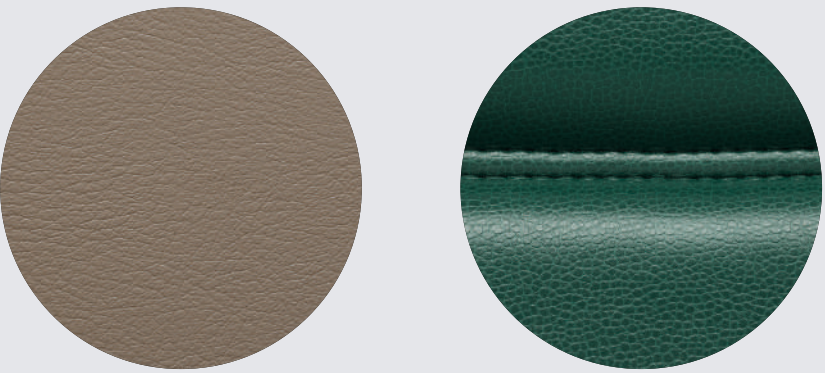

Högsta kvalitet: all KaVo-klädsel görs för hand i Tyskland, i designstudiokvalitet. Både RELAXline-klädseln med sin mjuka, läderliknande yta och snygga sömmar och den traditionella klädseln med en matt finish, kompletteras elegant med färgkollektionen "Inspired by Nature". Vilken klädsel du än väljer kan du tack vare färgkollektionen skapa estetiska detaljer med din dentalenhet, enligt de senaste interiörtrenderna.

Dental Excellence på alla områden

Vad vårt varumärke står för

KaVo är en väletablerad, pålitlig tillverkare, och kommer alltid att vara. Vi och våra produkter har stått för högsta kvalitet och tillförlitlighet i över 100 år, så att våra kunder kan koncentrera sig på vad som är viktigt.

KaVo kombinerar skickligt och kompromisslöst essentiella krav, ergonomi, högsta hygienstandarder och design för att skapa en oslagbar helhet. Tack vare vårt perfekta samspel mellan dynamik och expertis ligger vi alltid i framkant.



KaVo-dentalenheter:
en investering i din hälsa



KaVo instrument:
känn skillnaden.



KaVo-bildhantering:
se mer, planera bättre



Tandläkarutbildning:
effektivt lärande

Produkterna, utrustningen och tjänsterna som visas och beskrivs i denna broschyr är inte tillgängliga i alla länder. Informationen i denna broschyr motsvarar kunskapsnivån vid trycktillfället. KaVo Dental GmbH ansvarar inte för avvikelser i färg och form i illustrationerna, eller några fel eller feltryck, och förbehåller sig rätten att göra ändringar i broschyren när som helst.

KaVo, ESTETICA, uniQa, amiQa, Primus och Lumina är registrerade varumärken tillhörande KaVo Dental GmbH.